

Ελληνική έκδοση / Σεπτέμβριος 2026

Προσθετική εμφυτευμάτων

Κατάλογος προϊόντων iCervico

i-base

Το μοναδικό κολόβωμα με
δυνατότητα σάρωσης*.



Διανομέας · Ariston Dental

467 Λεωφόρος Μεσογείων
153 43 Αγία Παρασκευή, **Αθήνα**
T: +30 210 80 30 341

13 Ναυάρχου Κουντουριώτου
546 25 **Θεσσαλονίκη**
T: +30 2310 268 020

75 Λεοντίου Μαχαιρά, Γραφείο 203
3025 **Λεμεσός**
T: +357 25322895

info@aristondental.com
aristondental.com

* Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Ø4.5 mm / PCA

Παρουσίαση του συστήματος

Το i-base έχει σχεδιαστεί ώστε να παραμένει στη θέση του από το χειρουργείο έως την τελική αποκατάσταση. Η επούλωση, η σάρωση και η τοποθέτηση της προσθετικής εργασίας πραγματοποιούνται σε επίπεδο κολοβώματος.

Αποκατάσταση σε επίπεδο κολοβώματος

Μία γεωμετρία κεφαλής συνδέει τα κλινικά και εργαστηριακά στάδια, ανεξάρτητα από το μέγεθος του συμβατού εμφυτεύματος.

Η παρούσα έκδοση αφορά το i-base Ø4.5 mm για εμφυτεύματα κωνικής σύνδεσης Paltop (PCA).

100%

Ψηφιακή ροή προσθετικής εργασίας

Άμεση σάρωση, εγγενείς βιβλιοθήκες CAD και τοποθέτηση σε επίπεδο κολοβώματος.

- 03 Το σύστημα
- 04 Το i-base και οι επιλογές του
- 06 Κολοβώματα επούλωσης: σχήματα και επιλογή
- 10 Sleeve, βίδες και εργαστηριακά εξαρτήματα
- 12 Η φιλοσοφία iCervico
- 13 Χειρουργική ροή εργασίας
- 14 Τεχνικές αποτύπωσης
- 16 Μονήρεις αποκαταστάσεις
- 17 Αποκαταστάσεις με γέφυρες
- 19 Ψηφιακές βιβλιοθήκες
- 20 Τεκμηριωμένο κλινικό περιστατικό
- 22 Ροπές και στοιχεία παραγγελίας

Το i-base παραμένει στη θέση του κατά την επούλωση, τη σάρωση και την τοποθέτηση της προσθετικής εργασίας.

<1%*

Αναφερόμενη αποκοχλίωση βίδας.

* Προκαταρκτικά δεδομένα. Η σχετική επιστημονική δημοσίευση βρίσκεται υπό προετοιμασία.

Εξαρτήματα του συστήματος



01 / 04

i-base

Το σταθερό σημείο αναφοράς για κάθε στάδιο της αποκατάστασης.



02 / 06

Κολοβώματα επούλωσης iCervico

Ανατομική διαμόρφωση των ιστών, με ελεύθερο προσανατολισμό 360° σε οριζόντιο επίπεδο.



03 / 10

AR/R Sleeve

Μεσοφασικοί κύλινδροι τιτανίου για μονήρεις ή πολλαπλές εργασίες.



04 / 11

Βίδα UBH30

Συγκράτηση M1.6 με διόρθωση της γωνίας του αυλού κοχλίωσης έως 30°.



05 / 11

Ανάλογο διπλής χρήσης

Ένα εργαστηριακό ανάλογο για εκτυπωμένα εκμαγεία και εκμαγεία γύψου.



06 / 11

Άξονες αποτύπωσης

Επιλογές ψηφιακής και συμβατικής αποτύπωσης.

i-base



Ø4.5 mm / PCA
Ροπή κοχλίωσης 35 Ncm

01

Σάρωση του κολοβώματος

Τέσσερις επιφάνειες σάρωσης στην τετραεδρική κεφαλή παρέχουν το ψηφιακό σημείο αναφοράς.

02

Ευρεία προσθετική επιφάνεια σύνδεσης

Η αυξημένη επιφάνεια επαφής κατανέμει τα φορτία στην προσθετική σύνδεση.

03

Γεωμετρία τετραπλής επιφάνειας, γωνία 10°

Η καθορισμένη γεωμετρία έδρασης καθοδηγεί την εφαρμογή της προσθετικής εργασίας.

04

Αυχένας με γωνία ανάδυσης 15°

Ο κοίλος αυχένας διαμορφώνει τη διαβλεπνογόνια μετάβαση.

05

Ενιαία κατασκευή

Η απουσία καμινάδας επιτρέπει τον συμπαγή σχεδιασμό του κολοβώματος.

06

Επιλογή διαβλεπνογόνιου ύψους

Τρία ύψη και μία γωνιώδης επιλογή 30° διαθέτουν κοινή γεωμετρία κεφαλής.

Ύψη και γωνία του i-base

Επιλέξτε το i-base σύμφωνα με το βάθος του εμφυτεύματος και το σχεδιαζόμενο ύψος των ιστών. Και οι τέσσερις επιλογές έχουν την ίδια γεωμετρία προσθετικής κεφαλής.

**H 1.5 mm**

5213006652684

**H 2.5 mm**

5213006652691

**H 3.5 mm**

5213006652509

**Γωνιώδες 30°**

5213006652493

Προδιαγραφή	Ευθύ i-base	Γωνιώδες i-base
Σύνδεση	Κωνική Paltop (PCA)	Κωνική Paltop (PCA)
Προσθετική πλατφόρμα	Ø4.5 mm	Ø4.5 mm
Διαβλενογόonio ύψος / γωνία	1.5 / 2.5 / 3.5 mm	30°
Ροπή κοχλίωσης	35 Ncm	35 Ncm
Κατσαβίδι	iCervico 18 / 25 mm ή κασάνια χειρός PEEK	Τυπικό εξάγωνο 1.25 mm

Σχεδιασμός της γωνίωσης. Η βίδα UBH30 με το κοντό Sleeve επιτρέπει διόρθωση της γωνίας του αυλού κοχλίωσης έως 30°. το i-base 30° επιτρέπει συνολική διόρθωση έως 60° με τον κατάλληλο συνδυασμό εξαρτημάτων.

Κολοβώματα επούλωσης iCervico



360°

Ελεύθερος προσανατολισμός

Περιστρέψτε το κολοβώμα επούλωσης iCervico επί του i-base, ανεξάρτητα από τη σύνδεση του εμφυτεύματος.

25 Ncm

Ροπή κοχλίωσης επί του i-base

Ανατομικές επιλογές

Σχήματα για πρόσθιους, προγόμφιους, κάτω και άνω γομφίους. Μικρό, μεσαίο και μεγάλο μέγεθος· κεντρικές και έκκεντρες επιλογές.

Δυνατότητα προσαρμογής στο ιατρείο

Η βιοσυμβατή εκτυπωμένη ρητίνη επιτρέπει τροποποίηση στο ιατρείο. Διατίθενται κυλινδρικές επιλογές 6 και 7 mm.

+50–100%

Αναφερόμενη αύξηση πλάτους της ακρολοφίας

Εντός του πρώτου χιλιοστού κάτω από το ελεύθερο ουλικό όριο. Προκαταρκτικά στοιχεία του κατασκευαστή από πολυκεντρική μελέτη σε εξέλιξη· τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί.

Εξαρτήματα μίας χρήσης. Κωδικοί ειδών / 07. Κεντρικά και έκκεντρα σχήματα / 08–09.

Επιλογή κολοβώματος εππούλωσης

   			
Πρόσθιοι	Προγόμφιοι	Κάτω γομφίοι	Άνω γομφίοι
Σχήμα / θέση	Μικρό μέγεθος	Μεσαίο μέγεθος	Μεγάλο μέγεθος
Πρόσθιοι Κεντρικό	5213006653179	5213006653193	5213006653209
Πρόσθιοι Έκκεντρο	5213006653391	5213006653292	5213006653308
Προγόμφιοι Κεντρικό	5213006653186	5213006653216	5213006653223
Προγόμφιοι Έκκεντρο	5213006653407	5213006653315	5213006653322
Κάτω γομφίοι Κεντρικό	5213006653230	5213006653247	5213006653254
Κάτω γομφίοι Έκκεντρο	5213006653339	5213006653346	5213006653353
Άνω γομφίοι Κεντρικό	5213006653261	5213006653278	5213006653285
Άνω γομφίοι Έκκεντρο	5213006653360	5213006653377	5213006653384

Κυλινδρικές επιλογές

Διάμετρος	6 mm	7 mm
Κωδικός είδους	5213006653155	5213006653162

Πλάγια και άνω όψη: κεντρικά / 08· έκκεντρα / 09.

Κεντρικά σχήματα

Πλάγιες και άνω όψεις / μικρό, μεσαίο και μεγάλο μέγεθος. Ανατομικές ομάδες και κυλινδρικές επιλογές.

Πρόσθιοι



aS



5213006653179



aM



5213006653193



aL



5213006653209

Προγόμφιοι



pS



5213006653186



pM



5213006653216



pL



5213006653223

Κάτω γομφίοι



m1S



5213006653230



m1M



5213006653247



m1L



5213006653254

Άνω γομφίοι



m2S



5213006653261



m2M



5213006653278



m2L



5213006653285

Κυλινδρικά

6 και 7 mm



6 mm



5213006653155



7 mm



5213006653162

Έκκεντρα σχήματα

Πλάγιες και άνω όψεις / μικρό, μεσαίο και μεγάλο μέγεθος. Η ένδειξη Offset αντιστοιχεί στο «Έκκεντρο» του πίνακα παραγγελιών.

Πρόσθιοι



aS έκκεντρο

5213006653391

aM έκκεντρο

5213006653292

aL έκκεντρο

5213006653308

Προγόμφιοι



pS έκκεντρο

5213006653407

pM έκκεντρο

5213006653315

pL έκκεντρο

5213006653322

Κάτω γομφίοι



m1S έκκεντρο

5213006653339

m1M έκκεντρο

5213006653346

m1L έκκεντρο

5213006653353

Άνω γομφίοι



m2S έκκεντρο

5213006653360

m2M έκκεντρο

5213006653377

m2L έκκεντρο

5213006653384

Σύγκριση με κεντρικά σχήματα / 08. Πλήρης πίνακας παραγγελιών / 07.

Οι όψεις των προϊόντων μεγεθύνονται για την επιλογή και δεν αποτελούν διαστασιολογημένο σχέδιο.


AR/R Sleeve

Η σύνδεση στην κάτω επιφάνεια καθορίζει την εφαρμογή του Sleeve επί του i-base.

AR

Μονήρης εργασία

Αντιπεριστροφική σύνδεση

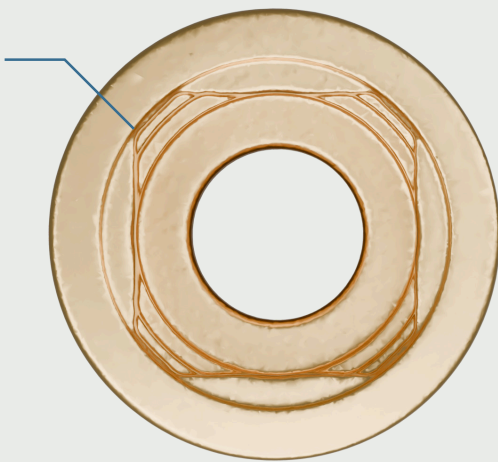


Τετραεδρική υποδοχή

Η τετραεδρική υποδοχή ακολουθεί τη θέση του i-base και παρέχει αντιπεριστροφική εφαρμογή της προσθετικής εργασίας. Το AR Sleeve λειτουργεί και ως scan post.

R

Γέφυρες

Περιστροφική σύνδεση

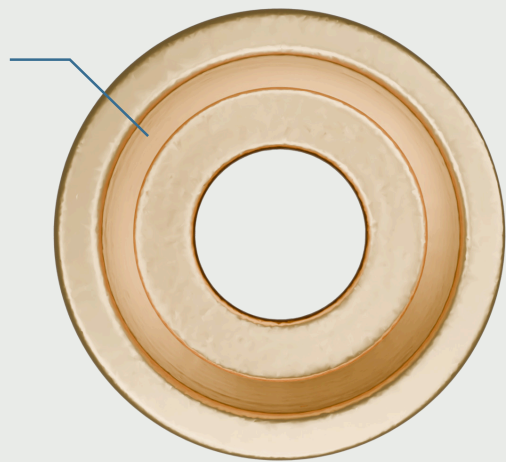

Κυκλική υποδοχή

Η κυκλική υποδοχή διευκολύνει την κοινή φορά ένθεσης. Χρησιμοποιήστε το R Sleeve για γέφυρες και εξατομικευμένα κολοβώματα επούλωσης iCervico στο ιατρείο.




Μακρύ και κοντό Sleeve

Συγκολλήστε το Sleeve τιτανίου στην προσθετική εργασία εξωστοματικά. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο ύψος ή κόψτε στη χαραγμένη ένδειξη· οι βιβλιοθήκες περιλαμβάνουν μακριές και κοντές επιλογές.

30 Ncm Ροπή κοχλίωσης προσθετικής εργασίας

Κάτω όψεις Απεικόνιση των επιφανειών σύνδεσης

Εξαρτήματα συγκράτησης και αποτύπωσης

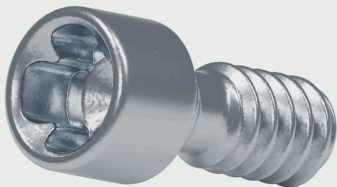

Βίδα συγκράτησης UBH30

M1.6, μήκος 5.1 mm. Επιτρέπει διόρθωση της γωνίας του αυλού κοχλίωσης έως 30° σε εύρος κατεύθυνσης 360°.

5213006652608



Ανάλογο διπλής χρήσης

Ένα ανάλογο για όλες τις επιλογές i-base, για εκτυπωμένα εκμαγεία και συμβατικά εκμαγεία γύψου.

5213006652592



Άξονες αποτύπωσης

Σαρώσιμοι και συμβατικοί άξονες για μονήρεις και πολλαπλές εργασίες, με ανοικτό ή κλειστό δισκάριο.

Ψηφιακός 5213006652486

Αναλογικός 5213006652479

Τυπική βίδα συγκράτησης

Χρόμιο Ti6Al4V, M1.6 × 0.35. Διακριτό εξάρτημα από τη βίδα UBH30 που παρουσιάζεται παραπάνω.

5213006652738

Επιλογή κατσαβιδιού


Επιλέξτε το κατσαβίδι για το εξάρτημα που τοποθετείται. Η τοποθέτηση του i-base και η συγκράτηση της προσθετικής εργασίας απαιτούν διαφορετικά εργαλεία.

[Ροπές και κατσαβίδια / 22 →](#)

Οι άξονες αποτύπωσης χρησιμοποιούν την παρεχόμενη βίδα, η οποία κοχλιώνεται με το χέρι. Όλοι οι κωδικοί εξαρτημάτων και εργαλείων παρατίθενται στη σελίδα 23.

Η φιλοσοφία iCervico

Το i-base παραμένει στη θέση του. Η επούλωση, η αποτύπωση και η αποκατάσταση πραγματοποιούνται σε επίπεδο κολοβώματος.

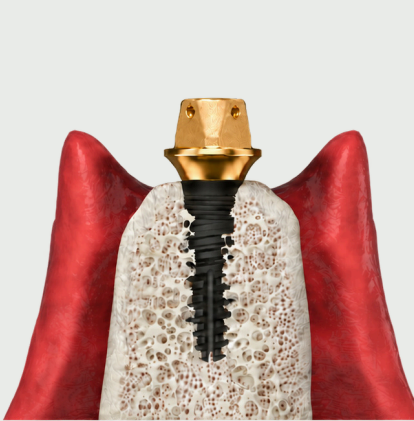

Το i-base στη θέση του



Ανατομική επούλωση



Κοχλιούμενη αποκατάσταση

01 / Τοποθέτηση

Ορισμός σημείου αναφοράς

Τοποθετήστε το i-base κατά την τοποθέτηση ή την αποκάλυψη του εμφυτεύματος. Επιλέξτε το διαβλεννογόνιο ύψος και κοχλιώστε στα 35 Ncm.

02 / Επούλωση

Διαμόρφωση του προφίλ ανάδυσης

Προσανατολίστε και στερεώστε ένα προκατασκευασμένο ή εξατομικευμένο κολόβωμα επούλωσης iCervico. Η ροπή κοχλίωσης είναι 25 Ncm.

03 / Αποτύπωση

Μεταφορά της γεωμετρίας

Σαρώστε το i-base, χρησιμοποιήστε AR Sleeve ή σαρώσιμο άξονα ή λάβετε συμβατικό αποτύπωμα.

04 / Αποκατάσταση


Τοποθέτηση σε επίπεδο κολοβώματος

Σχεδιάστε μέσω των βιβλιοθηκών iCervico. Τοποθετήστε την τελική αποκατάσταση με ροπή 30 Ncm.

Χειρουργική ροή / 13 · Τεχνικές αποτύπωσης / 14–15 · Μονήρης εργασία / 16 · Γέφυρες / 17

Χειρουργική ροή εργασίας


Τοποθετήστε το i-base κατά την τοποθέτηση ή την αποκάλυψη του εμφυτεύματος. Επιλέξτε σχήμα και μέγεθος κολοβώματος επούλωσης iCervico για το επιθυμητό προφίλ ανάδυσης.

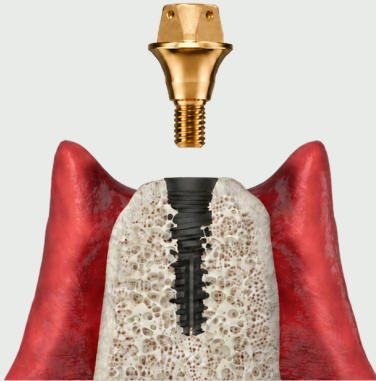

01

Τοποθέτηση του i-base

Επιλέξτε το διαβλεννογόνιο ύψος. Τοποθετήστε το i-base με το συμβατό κατσαβίδι και κοχλιώστε στα 35 Ncm.

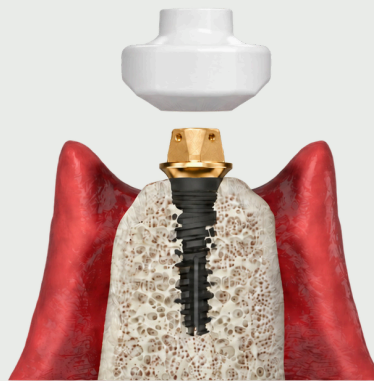

02

Προσανατολισμός του κολοβώματος επούλωσης

Τοποθετήστε το επιλεγμένο κολόβωμα επούλωσης iCervico και περιστρέψτε το ελεύθερα για να ευθυγραμμίσετε το ανατομικό σχήμα.



03

Στερέωση του κολοβώματος

Κοχλιώστε τη βίδα συγκράτησης στα 25 Ncm. Το i-base παραμένει στη θέση του σε όλη τη διάρκεια της επούλωσης.



Μεταξύ των επισκέψεων

Επανατοποθετήστε το κολόβωμα επούλωσης iCervico μετά τη σάρωση, τα αποτυπώματα και τις δοκιμές, έως την τοποθέτηση της προσθετικής εργασίας. Σε γέφυρες, διατηρήστε το προφίλ σε κάθε θέση.

35 Ncm

i-base επί του εμφυτεύματος

25 Ncm

Κολόβωμα επούλωσης επί του i-base

Ψηφιακά αποτυπώματα

Επιλέξτε τη γεωμετρία αποτύπωσης πριν από την αντίστοιχη βιβλιοθήκη CAD. Η σάρωση μπορεί να καταγράψει το i-base απευθείας ή μέσω τοποθετημένου εξαρτήματος σάρωσης.



01

Άμεση σάρωση του i-base

Αφαιρέστε το κολόβωμα επούλωσης iCervico και καταγράψτε την τετραεδρική κεφαλή, τους γύρω ιστούς και το τόξο. Η ματ κεφαλή αποτελεί το σημείο αναφοράς.



02

Σάρωση μέσω εξαρτήματος

Τοποθετήστε AR Sleeve ή σαρώσιμο άξονα αποτύπωσης. Καταγράψτε την εξωτερική γεωμετρία του και χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη βιβλιοθήκη.



Ολοκλήρωση της καταγραφής

Συμπεριλάβετε το τόξο αποκατάστασης, τους μαλακούς ιστούς, το επιλεγμένο σημείο αναφοράς σάρωσης, το αντίθετο τόξο και τη σύγκλειση. Προσδιορίστε την επιλεγμένη προσθετική μέθοδο για το εργαστήριο.

[Γνάθος](#)[Μαλακοί ιστοί](#)[scan post](#)


Επανατοποθετήστε το κολόβωμα επούλωσης iCervico μετά την αποτύπωση.

Κοχλιώστε στα 25 Ncm μεταξύ των επισκέψεων. Το i-base παραμένει στη θέση του σε όλα τα προσθετικά στάδια.

Το AR Sleeve μεταφέρει την αντιπεριστροφική θέση του i-base. Το R Sleeve δεν παρέχει το ίδιο σημείο αναφοράς προσανατολισμού.

Συμβατικά αποτυπώματα

Χρησιμοποιήστε τον άξονα και τη βίδα αποτύπωσης για τη μεταφορά της θέσης του i-base. Η επιλεγμένη τεχνική δισκαρίου καθορίζει τον τρόπο απελευθέρωσης και μεταφοράς του άξονα.

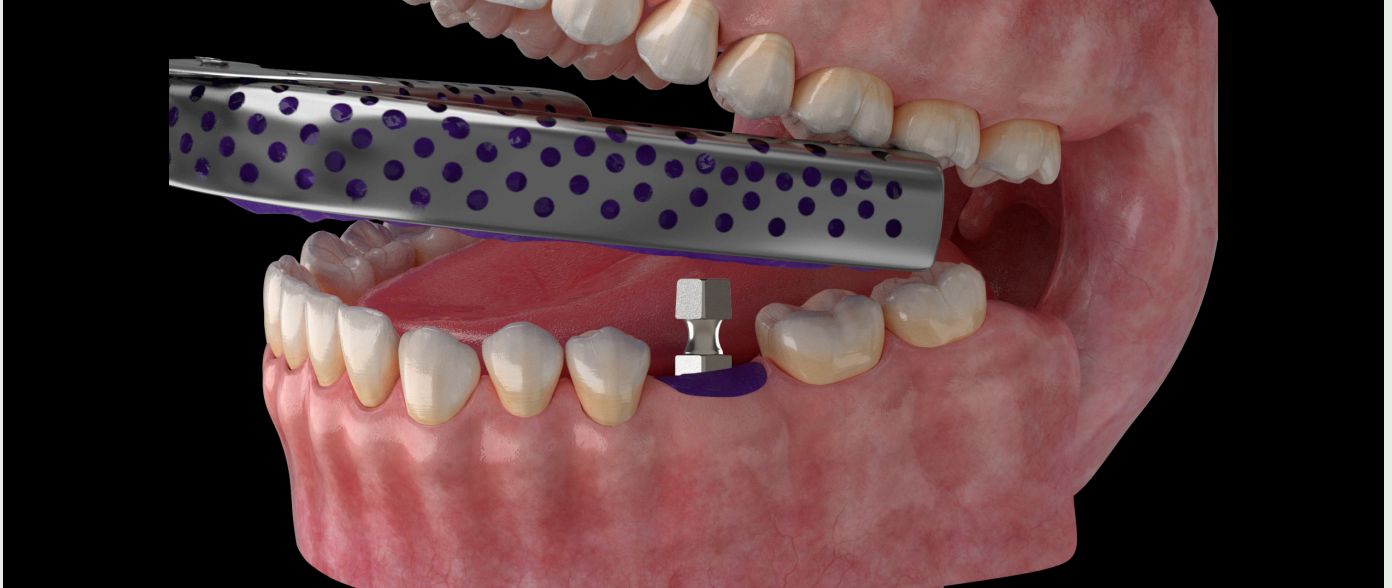

Άξονας και βίδα αποτύπωσης / συμβατικό αποτύπωμα με δισκάριο

Ανοικτό δισκάριο / παραλαβή

- 1. Τοποθέτηση και καταγραφή.** Τοποθετήστε τον άξονα με τη βίδα αποτύπωσής του. Εξασφαλίστε πρόσβαση στην κεφαλή της βίδας μέσω του δισκαρίου και λάβετε το αποτύπωμα.
- 2. Απελευθέρωση πριν από την αφαίρεση.** Μετά την πήξη του υλικού, απελευθερώστε τη βίδα μέσω του ανοίγματος. Αφαιρέστε το αποτύπωμα με τον άξονα συγκρατημένο μέσα σε αυτό.
- 3. Σύνδεση του αναλόγου.** Συνδέστε το ανάλογο διπλής χρήσης στον συγκρατημένο άξονα, διατηρώντας τη θέση του στο αποτύπωμα.

Κλειστό δισκάριο / μεταφορά

- 1. Τοποθέτηση και καταγραφή.** Χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό άξονα και βίδας που προορίζεται για μεταφορά με κλειστό δισκάριο. Καταγράψτε τον άξονα και τους γύρω ιστούς.
- 2. Μεταφορά μετά την αφαίρεση.** Αφαιρέστε το αποτύπωμα, κατόπιν αφαιρέστε τον άξονα από το i-base και συνδέστε τον με το ανάλογο διπλής χρήσης.
- 3. Ακριβής επανατοποθέτηση.** Επαναφέρετε το σύνολο άξονα και αναλόγου στην καθορισμένη θέση του στο αποτύπωμα πριν από την κατασκευή του εκμαγείου.

Επανατοποθετήστε το κολόβωμα επούλωσης iCervico μετά το αποτύπωμα. Το ανάλογο διπλής χρήσης αναπαράγει το σημείο αναφοράς του i-base σε συμβατικά εκμαγεία γύψου και εκτυπωμένα εκμαγεία.

Ακολουθήστε τον προβλεπόμενο συνδυασμό εξαρτημάτων και τις οδηγίες για την επιλεγμένη τεχνική δισκαρίου.

Μονήρεις αποκαταστάσεις

Το i-base παραμένει στη θέση του από την προσωρινή αποκατάσταση έως την τελική στεφάνη.

Προσωρινές αποκαταστάσεις

Οι προσωρινές αποκαταστάσεις μπορούν να κατασκευαστούν απευθείας επί του i-base, χωρίς Sleeve, για τη μείωση του κόστους θεραπείας.

Ψηφιακά αποτυπώματα / 14 · Συμβατικά αποτυπώματα / 15

Τελικές αποκαταστάσεις

Οι τελικές μονήρεις αποκαταστάσεις πρέπει να κατασκευάζονται επί AR Sleeve. Επιλέξτε τη γεωμετρία μακριού ή κοντού Sleeve στη βιβλιοθήκη μονήρους εργασίας και κατασκευάστε τη στεφάνη. Συγκολλήστε το AR Sleeve στη στεφάνη εξωστοματικά.




Τοποθέτηση της τελικής στεφάνης



01

Αφαίρεση του κολοβώματος επούλωσης


Αποκαλύψτε το τοποθετημένο i-base για την τοποθέτηση της αποκατάστασης.

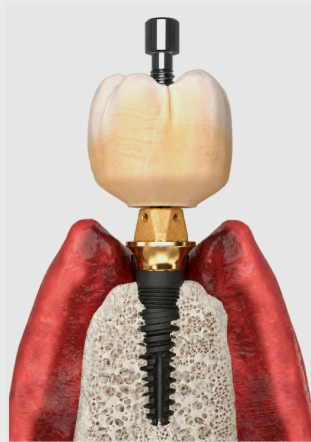

02

Τοποθέτηση της στεφάνης

Τοποθετήστε την κοχλιούμενη στεφάνη επί του i-base.

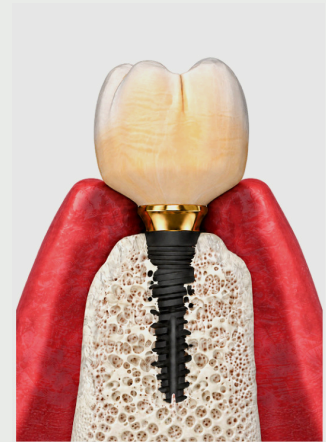

03

Στερέωση της αποκατάστασης

Κοχλιώστε τη βίδα συγκράτησης της προσθετικής εργασίας στα 30 Ncm.


Διόρθωση της γωνίας του αυλού κοχλίωσης

Χρησιμοποιήστε το κοντό Sleeve με τη βίδα UBH30 για διόρθωση έως 30°.

Επανατοποθετήστε το κολόβωμα επούλωσης iCervico στα 25 Ncm μεταξύ των επισκέψεων. Ψηφιακές βιβλιοθήκες / 19.

Αποκαταστάσεις με γέφυρες

Το i-base παραμένει το σημείο αναφοράς σε κάθε θέση, από τη διαμόρφωση των ιστών έως την αποτύπωση και την τοποθέτηση.

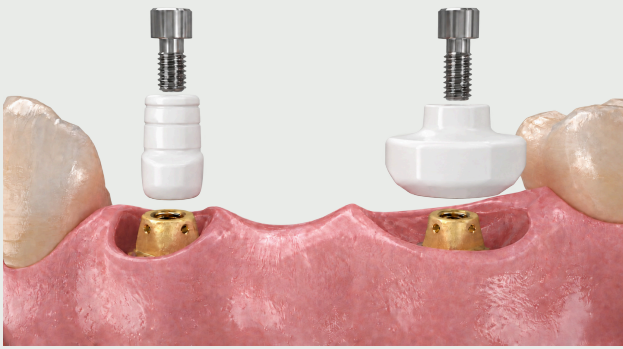

01

Προετοιμασία των θέσεων

Μετά την επούλωση, αφαιρέστε τα κολοβώματα επούλωσης iCervico και αποτυπώστε τα i-base. Επιλέξτε άμεση σάρωση, εξαρτήματα σάρωσης ή συμβατική μεταφορά.



02

Σχεδιασμός επί R Sleeve

Επιλέξτε γέφυρες και γεωμετρία μακριού ή κοντού R Sleeve. Συγκολλήστε τα Sleeve στην προσθετική εργασία εξωστοματικά.



Τοποθέτηση σε επίπεδο κολοβώματος

Τοποθετήστε την κοχλιούμενη γέφυρα ή δοκό και κοχλιώστε κάθε βίδα συγκράτησης της προσθετικής εργασίας στα 30 Ncm. Τα i-base παραμένουν στη θέση τους.


Η εργαστηριακή ροή εργασίας υποστηρίζει προσωρινές και τελικές αποκαταστάσεις.

Διατήρηση του προφίλ ανάδυσης.

Επανατοποθετήστε τα κολοβώματα επούλωσης iCervico μεταξύ των επισκέψεων αποτύπωσης, δοκιμής και τοποθέτησης.


Μεταφορά γεφυρών

Διατηρήστε τη σχέση μεταξύ των i-base σε όλη την έκταση της εργασίας. Επιλέξτε τη μέθοδο αποτύπωσης και το αντίστοιχο εργαστηριακό σημείο αναφοράς.

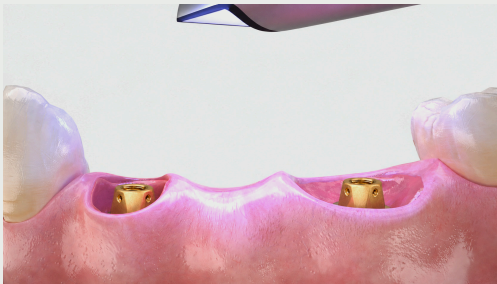**A**


Άμεση ψηφιακή αποτύπωση

Αφαιρέστε τα κολοβώματα επούλωσης iCervico και σαρώστε τις κεφαλές των i-base σε όλο το τόξο. Συμπεριλάβετε το αντίθετο τόξο και την καταγραφή της σύγκλεισης.

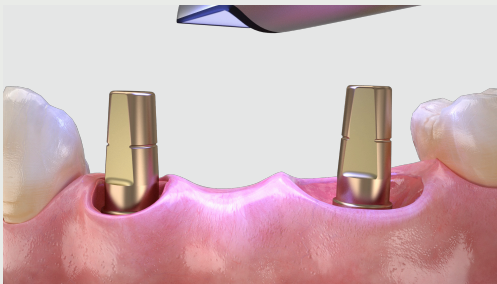**B**

Αποτύπωση μέσω εξαρτημάτων

Τοποθετήστε AR Sleeve ή σαρώσιμους άξονες αποτύπωσης και επιλέξτε την αντίστοιχη γεωμετρία βιβλιοθήκης.

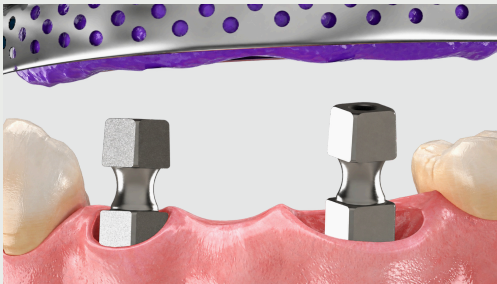**C**

Συμβατική μεταφορά

Τοποθετήστε τους άξονες με τις βίδες αποτύπωσής τους και καταγράψτε την έκταση της εργασίας. Μεταφέρετε τις θέσεις στο εργαστήριο με την επιλεγμένη τεχνική διακαρίου.

AR για προσανατολισμό της σάρωσης

Το AR Sleeve μεταφέρει την αντιπεριστροφική θέση κάθε i-base.

R για την τελική εργασία

Το R Sleeve παρέχει ελευθερία περιστροφής στην αποκατάσταση με γέφυρες.

Επανατοποθετήστε τα κολοβώματα επούλωσης iCervico μετά την αποτύπωση. Επιλέξτε γέφυρες και την επιθυμητή γεωμετρία R Sleeve στην εργαστηριακή βιβλιοθήκη.

Ψηφιακές βιβλιοθήκες

Οι βιβλιοθήκες εξαρτημάτων και δοντιών iCervico για exocad και 3Shape συνδέουν την αποτυπωμένη γεωμετρία με τον σχεδιασμό της αποκατάστασης.

exocad + 3Shape

Μονήρης εργασία

Αντιπεριστροφική γεωμετρία.

- Επί AR Sleeve, μακριού ή κοντού
- Απευθείας επί του i-base
- Κοχλιοσυγκολλούμενη ή κοχλιούμενη εργασία


Γέφυρες

Περιστροφική γεωμετρία.

- Επί R Sleeve, μακριού ή κοντού
- Απευθείας επί του i-base
- Κοχλιοσυγκολλούμενη ή κοχλιούμενη εργασία


Αυχενικά προφίλ

Οι βιβλιοθήκες δοντιών συμπληρώνουν τα σχήματα των κολοβωμάτων επούλωσης iCervico.

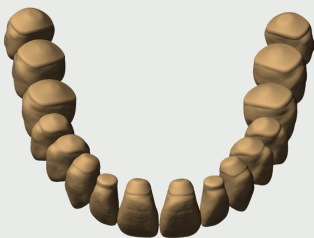


01

Ωοειδές

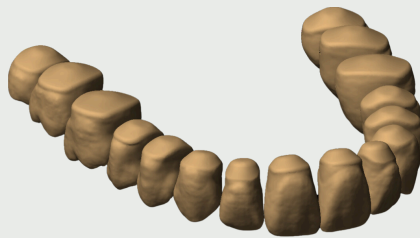

02

Ορθογώνιο

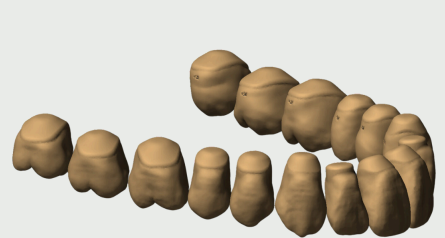

03

Τριγωνικό


Ζητήστε την τρέχουσα έκδοση

icervico.com/libraries ➔


Οι βιβλιοθήκες εξαρτημάτων περιλαμβάνουν παραλλαγές i-base, κολοβώματα επούλωσης iCervico, Sleeve, βίδες συγκράτησης, ανάλογο διπλής χρήσης και αρχεία βαθμονόμησης.

Κλινικό περιστατικό: τοποθέτηση εμφυτεύματος


Ο ασθενής προσήλθε τρεις μήνες μετά την αύξηση της ακρολοφίας. Επιλέχθηκαν εμφύτευμα PCA και i-base με διαβλεννογόνιο ύψος 1.5 mm.

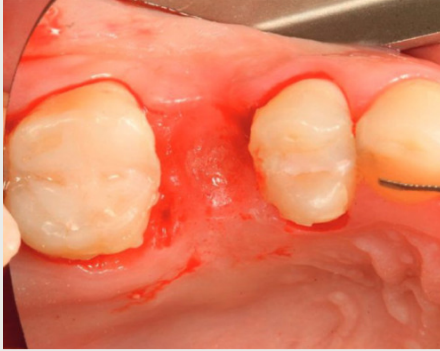

01 Επουλωμένη θέση, μασητική όψη.

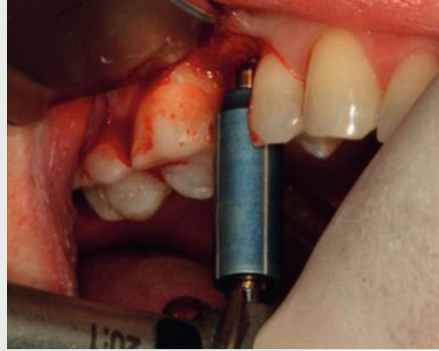

02 Τοποθέτηση αρχικού τρυπάνου.

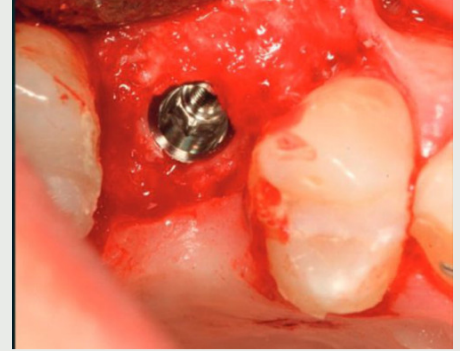


03 Εμφύτευμα PCA στη θέση του.

01–03


Το αρχικό τρύπανο VPI εντόπισε το κέντρο της οστεοτομίας. Η αναφορά του περιστατικού περιγράφει πρωτογενή σταθερότητα κατά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος.



04 Αντισηπτική γέλη επί του i-base.

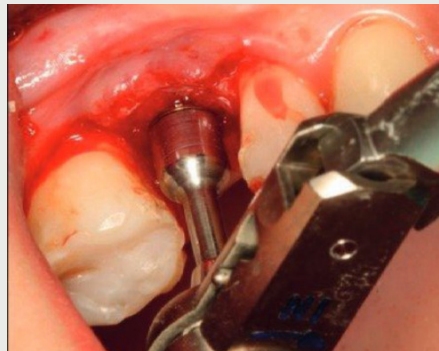

05 Ροπή κοχλίωσης: 35 Ncm.

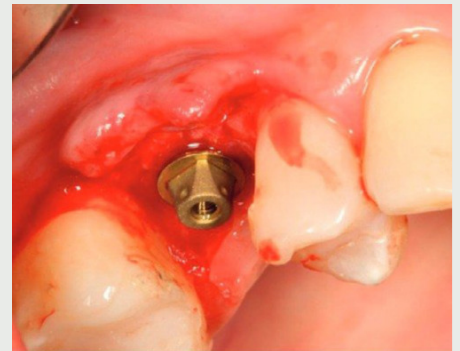

06 Το i-base στη θέση του.

04–06

Το επιλεγμένο i-base επικαλύφθηκε με αντισηπτική γέλη, τοποθετήθηκε και κοχλιώθηκε. Παρέμεινε στη θέση του για την επακόλουθη επούλωση και αποκατάσταση.


Συντελεστές του κλινικού περιστατικού

Δρ. Ιωάννης Βεργούλλης / ειδικός εμφυτευματολόγος


Δρ. Μαριέττα Καλογήρου / οδοντίατρος αποκαταστατικής οδοντιατρικής

Δημήτρης Λιόλιος / οδοντοτεχνίτης


Κλινικό περιστατικό: αποκατάσταση

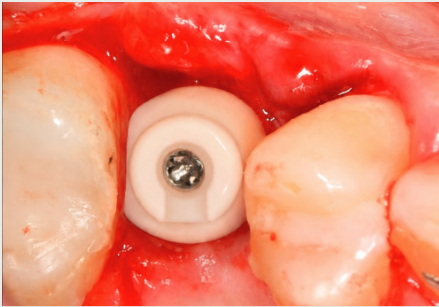

07 Μικρό κολόβωμα επούλωσης iCervico προγομφίων, τρέχουσας μορφής. Εικονογράφιση περιστατικού.

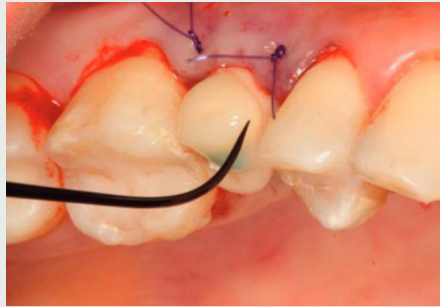

08 Άμεση προσωρινή αποκατάσταση.

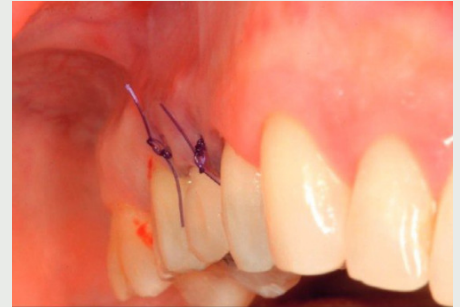

09 Παρειακή όψη κατά τη συρραφή.

Το κεντρικό μικρό κολόβωμα επούλωσης iCervico προγομφίου προσανατολίστηκε, τροποποιήθηκε άπω και κοχλιώθηκε στα 25 Ncm. Επί του κολοβώματος επούλωσης κατασκευάστηκε άμεση προσωρινή αποκατάσταση από ρητίνη.



10 Προφίλ ανάδυσης στις τρεις εβδομάδες.



11 AR Sleeve έτοιμο για σάρωση.

Στις τρεις εβδομάδες, αφαιρέθηκε το κολόβωμα επούλωσης iCervico και τοποθετήθηκε το AR Sleeve για ψηφιακή αποτύπωση. Το i-base παρέμεινε αδιάτακτο.



12 Τελική αποκατάσταση σε σύγκλειση.



13 Τελική στεφάνη, μασητική όψη.

Τα αποτελέσματα διαφέρουν ανά περίπτωση. Η εικόνα 07 είναι εικονογράφιση, βασισμένη στο κλινικό περιστατικό VPI iCervico, με την τρέχουσα μορφή του κολοβώματος επούλωσης iCervico. Οι υπόλοιπες φωτογραφίες και η ακολουθία του περιστατικού αποδίδονται στους συντελεστές της σελίδας 20.

Ροπές και συμβατότητα κατασβιδιών

35_{Ncm}

i-base

25_{Ncm}

Κολοβώματα επούλωσης
iCervico

30_{Ncm}

AR/R Sleeve

Εξάρτημα	Ροπή	Συμβατό κατασβίδι
Ευθύ i-base Ø4.5 mm PCA / H1.5, H2.5, H3.5	35 Ncm	Κατασβίδι iCervico, 18 ή 25 mm· Καστάνια χειρός iCervico (PEEK)
Γωνιώδες i-base 30°	35 Ncm	Τυπικό εξαγωνικό κατασβίδι 1.25 mm
Κολοβώματα επούλωσης iCervico	25 Ncm	Κατασβίδι UBH30 L18 / L25 / L32 mm
AR Sleeve / R Sleeve Τοποθέτηση προσθετικής εργασίας	30 Ncm	Κατασβίδι UBH30 L18 / L25 / L32 mm
Αξονες αποτύπωσης Συμβατικοί και σαρώσιμοι	Κοχλίωση με το χέρι	Παρεχόμενη βίδα

Πριν από την εφαρμογή ροπής

Επιβεβαιώστε την καθαριότητα των εξαρτημάτων, τη σωστή έδραση και τη σταθερή εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε βαθμονομημένο δυναμόκλειδο. Μην υπερβαίνετε ποτέ την καθορισμένη τιμή· ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του συμβατού εμφυτεύματος.

Πηγή: προδιαγραφές ροπής και συμβατότητας εξαρτημάτων VPI. Ncm = νιούτον επί εκατοστό. Συμβουλευτείτε τις ισχύουσες οδηγίες χρήσης πριν από την κλινική εφαρμογή.

Στοιχεία παραγγελίας

Εξάρτημα	Κωδικός είδους VPI
i-base / PCA / H1.5 mm / με βίδα συγκράτησης	5213006652684
i-base / PCA / H2.5 mm / με βίδα συγκράτησης	5213006652691
i-base / PCA / H3.5 mm / με βίδα συγκράτησης	5213006652509
i-base / PCA / γωνιώδες 30°	5213006652493
AR Sleeve / με βίδα	5213006652707
R Sleeve / με βίδα	5213006652714
Βίδα συγκράτησης / Ti / M1.6 × 0.35	5213006652738
Βίδα UBH30 / M1.6 / L5.1 mm	5213006652608
Σαρώσιμος άξονας αποτύπωσης	5213006652486
Συμβατικός άξονας αποτύπωσης	5213006652479
Ανάλογο διπλής χρήσης / ψηφιακό και συμβατικό εκμαγείο	5213006652592

Εργαλεία

Εργαλείο	Κωδικός είδους VPI
Κατσαβίδι iCervico / κοντό 18 mm	5213006652554
Κατσαβίδι iCervico / μακρύ 25 mm	5213006652721
Καστάνια χειρός / PEEK	5213006652547
Κατσαβίδι UBH / L18 mm	5213006652561
Κατσαβίδι UBH / L25 mm	5213006652578
Λαβή UBH30	5213006652462

Κολοβώματα επούλωσης / σελίδα 07 Οι κωδικοί ανατομικών και κυλινδρικών επιλογών παρατίθενται στον πίνακα επιλογής. Τιμές και διαθεσιμότητα κατόπιν αιτήματος.

Στοιχεία παραγγελίας: τιμοκατάλογος διανομένων VPI, 26 Αυγούστου 2025. Οι ονομασίες εργαλείων αποδίδουν την πηγή παραγγελίας· επιβεβαιώστε τη συμβατότητα βάσει των ισχυουσών οδηγιών χρήσης.

iCervico

Πληροφορίες προϊόντων και υποστήριξη

01

Βίδα UBH30

Εισέρχεται από το άνω μέρος του Sleeve.

02

AR Sleeve

Αντιπεριστροφική σύνδεση.
Η τετραεδρική υποδοχή βλέπει προς το i-base.

03

i-base

Η σύνδεση σε επίπεδο κολοβώματος.

VP Innovato Holdings LTD.

Ποσειδώνος 4Α, Αραδίππου 7101
Λάρνακα, Κύπρος

www.innovatoholdings.com

+357 99883898

icervico.com ↗



Το iCervico αναπτύσσεται και κατασκευάζεται από τη VP Innovato Holdings LTD., Κύπρος. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με σήμανση CE για αδειοδοτημένους επαγγελματίες οδοντιατρικής. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν από την εφαρμογή. Η παρούσα έκδοση αφορά εμφυτεύματα κωνικής σύνδεσης Paltor (PCA).

Τα Cervico, iCervico και i-base είναι σήματα κατατεθέντα της VP Innovato Holdings LTD. Τα εξαρτήματα είναι κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή/και προϊόντα για τα οποία εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. © 2026 VP Innovato Holdings LTD.



Διανομέας · Ariston Dental

467 Λεωφόρος Μεσογείων
153 43 Αγία Παρασκευή, **Αθήνα**
Τ: +30 210 80 30 341

info@aristondental.com · aristondental.com

13 Ναυάρχου Κουντουριώτου
546 25 **Θεσσαλονίκη**
Τ: +30 2310 268 020

75 Λεοντίου Μαχαιρά, Γραφείο 203
3025 **Λεμεσός**
Τ: +357 25322895